

## 人子宫内膜淋巴细胞分离液实验方法

### 【包装规格】

2×200ml/Kit

### 【产品组成】

为方便广大用户使用，试剂内容如下：

	名称	产品编号	规格
<b>A</b>	分离液 1		200ml
<b>B</b>	分离液 2		200ml
<b>C</b>	组织样本稀释液(赠品)	2010C1119	200ml
<b>D</b>	清洗液(赠品)	2010X1118	200ml
<b>E</b>	匀浆冲洗液(赠品)	F2013TBD	200ml
<b>F</b>	说明书		1 份

### 【实验前准备】

#### 1. 适用仪器

最大离心力可达 1200g 的水平转子离心机。

(离心机使用时调整为慢升慢降(具体参数请咨询离心机厂家)建议升速(指开始启动→达到设定离心力)的时间、降速(指设定离心时间完成→机器完全停止)时间均控制在 3 分钟左右。)

#### 2. 实验最佳分离时间

为获得最佳的实验结果，最好在取样 2h 内进行实验，样品存放时间越长，细胞分离效果越差。样品放置超过 6h 后分离效果更差甚至不能达到分离目的。

#### 3. 分离液的使用环境

- 分离液需常温(37℃-15℃)避光保存，严禁冷藏冷冻保存；
- 使用时严格遵守无菌操作规范(超净工作台或生物安全柜内)，并在 18℃-22℃ 环境温度下进行操作，20℃ 条件下分离效果最佳。超出此温度范围，有可能使分离液密度发生改变，造成分离效果不佳。

#### 4. 无菌离心管

序号	产品名称	产品货号	规格
1	无菌硅化离心管/10ml(随试剂盒附赠 5 支)	TUB2015	100 支/包



# TBD

www.tbdsience.com

天津市灏洋生物制品科技有限责任公司

天津灏洋华科生物科技有限公司

2	PBMC 高效离心管/50ml	601001	20 支/盒
3	PBMC 高效离心管/15ml	601002	5 支/包

### 5. 参考值（目的细胞参考范围）

本试剂盒可保证目的细胞的提取率大于 80%，不是纯度。如需获得高纯度目的细胞，请配合免疫磁珠分选。本试剂盒可减少磁珠的使用量，减少成本。

#### 【检验方法】

全过程样本、试剂及实验环境均需在 20±2℃（试剂需要复温。夏季 20℃，冬季 25℃。）的条件下进行。

#### 【组织样本单细胞悬液的制备】

1. 取组织块称重后，用眼科剪刀无菌操作，将组织剪成小块。
2. 将组织块放在 70µm 细胞筛网(产品编号：TBDM-SC，需要另购)上，用研磨器反复揉搓，边揉搓边加入匀浆冲洗液（以 0.1g 组织为例，约加 5-8ml），使细胞全部通过筛网冲到离心管中。

注：需要让细胞形成单细胞悬液冲到离心管中，而不是被研磨挤压到离心管中。

目的：使组织形成单个的细胞，而不是成团或碎片组织。单个的细胞更易分离。

3. 弃去筛网，组织研磨液经 450g，离心 10min，弃上清。
4. 用组织样本稀释液重悬组织细胞，将细胞悬液细胞浓度调整为 2×10<sup>8</sup>--1×10<sup>9</sup>/ml (以 0.1g 组织为例，约使用 1ml 组织样本稀释液重悬细胞)，备用。

注：A. 不同人的组织需要分离时，应逐个单独进行，不可同时混合进行研磨。

B. 若发现匀浆冲洗液冲洗的细胞粘度较大，可进行以下处理：

- ①配置新冲洗液：4 份的匀浆冲洗液加 1 份的胰蛋白酶/EDTA 消化液（产品编号：TE2004Y 需另购）进行稀释，配置为新冲洗液。
- ②离心管预处理：再研磨开始之前，在离心管中加入 1-2ml 胎牛血清，进行保护。
- ③再进行 2,3,4 实验步骤即可。

根据组织样本单细胞悬液量，分以下两种情况：


情况 A：样本细胞悬液量 0.5-1.5ml 时，实验方法如下：

1. 取一支 10ml 无菌硅化离心管，先加入 3ml 分离液 1，后缓慢加入 1.5ml 分离液 2，形成梯度界面，再缓慢吸取 0.5-1.5ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。各液面分层一定要清晰。（分离液试剂总量不得少于 4ml，样本细胞悬液不得多于 1.5ml。总液体量不得超过 2/3）。
2. 以 450g，离心 30min。
3. 离心后，此时离心管中由上至下分为六层。第一层为稀释液层。第二层为环状乳白色单

核细胞层 (第一层白环及上层 50% 分离液 2)。第三层为环状乳白色淋巴细胞层(下层 50% 分离液 2 及第二层白环)。第四层为透明分离液 1 液层。第五层为粒细胞层。第六层为红细胞层。

4. ①小心吸取稀释液层转移到新离心管 A 中。
- ②小心吸取离心管中的环状乳白色单核细胞层转移到新离心管 B 中。
- ③小心吸取离心管中的环状乳白色淋巴细胞层转移到新离心管 C 中。
5. 向含有淋巴细胞的离心管 C 中，加入 10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
6. 250g，离心 10min。弃去上清。
7. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
8. 250g，离心 10min，弃去上清。
9. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。

### 分离图例

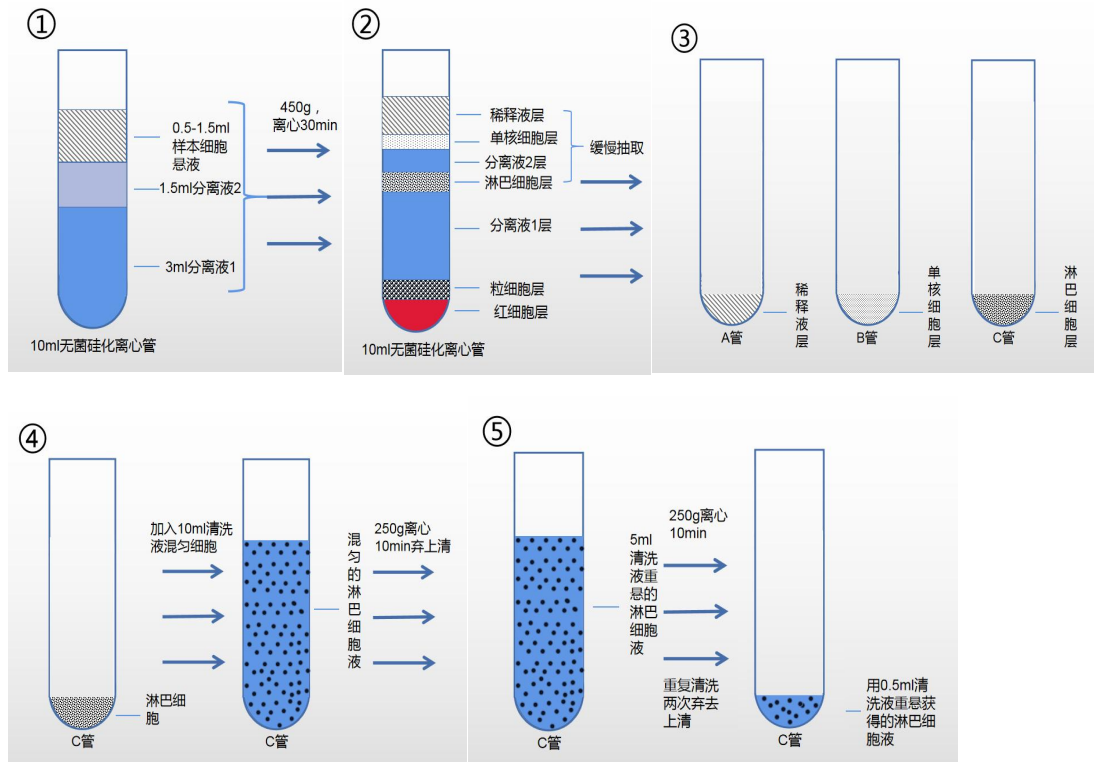


### 情况 B：样本细胞悬液量 2.0-3.0ml 时，实验方法如下：

1. 取一支 15ml 无菌离心管，先加入 5ml 分离液 1，后缓慢加入 2ml 分离液 2，形成梯度界面，再缓慢吸取 2-3ml 样本细胞悬液加于分离液液面之上。各液面分层一定要清晰。（总液体量不得超过 2/3）。

2. 以 600g，离心 30min。
3. 离心后，此时离心管中由上至下分为六层。第一层为稀释液层。第二层为环状乳白色单核细胞层（第一层白环及上层 50%分离液 2）。第三层为环状乳白色淋巴细胞层（下层 50%分离液 2 及第二层白环）。第四层为透明分离液 1 液层。第五层为粒细胞层。第六层为红细胞层。
4. ①小心吸取稀释液层转移到新离心管 A 中。  
②小心吸取离心管中的环状乳白色单核细胞层转移到新离心管 B 中。  
③小心吸取离心管中的环状乳白色淋巴细胞层转移到新离心管 C 中。
5. 向含有淋巴细胞的离心管 C 中，加入 10ml 清洗液（产品编号：2010X1118），混匀细胞。
6. 250g，离心 10min。弃去上清。
7. 用吸管吸取 5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）重悬所得细胞。
8. 250g，离心 10min，弃去上清。
9. 重复清洗两次，弃去上清，用 0.5ml 清洗液（产品编号：2010X1118）或根据下一步实验要求加入相对应液体，重悬所得细胞。


### 分离图例

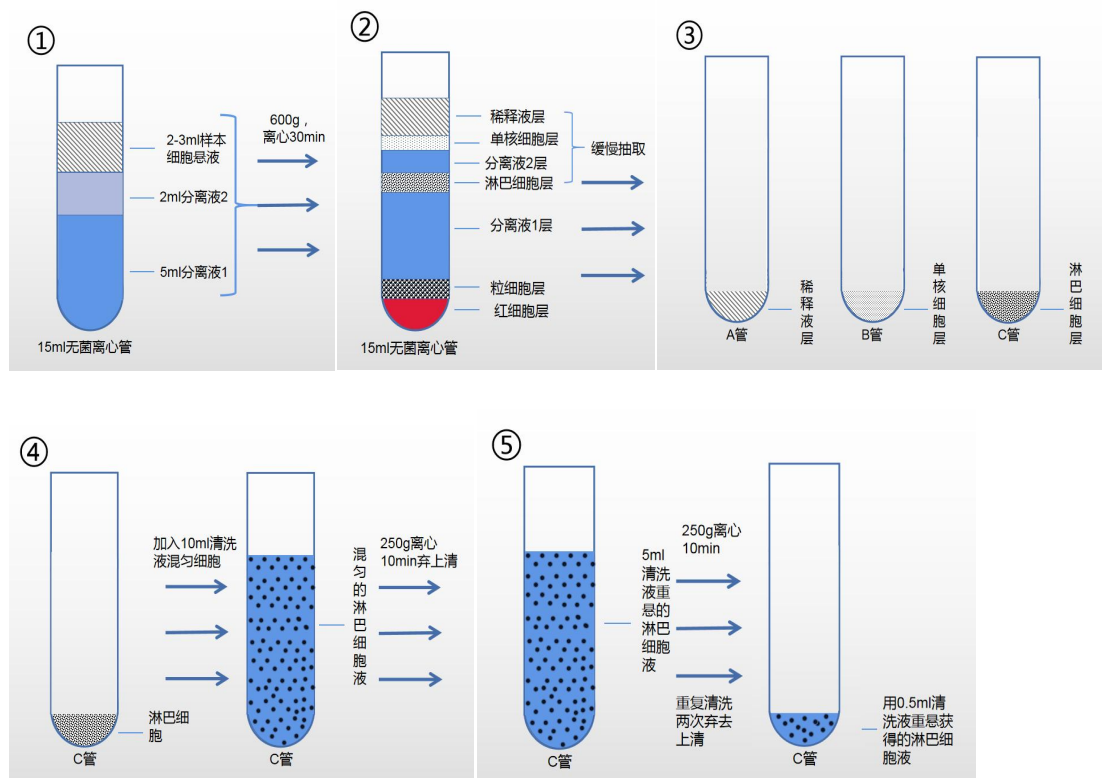

### 【分离过程中可能出现的情况及处理方案】


## 情况一：淋巴细胞层混杂红细胞

1. 吸取有红细胞混杂的淋巴细胞层。
2. 取 15 毫升离心管加入红细胞混杂的淋巴细胞层，根据红细胞残余数量酌情加入 5-8 倍红细胞裂解液。
- a. 如有红细胞混杂则加入适量红细胞裂解液（产品编号：NH4CL2009 需另购）将红细胞裂解（具体方法见“红细胞裂解液使用说明”）即得目的细胞。
- b. 参考红细胞裂解液说明书操作。少时多次裂解后获得淋巴细胞。

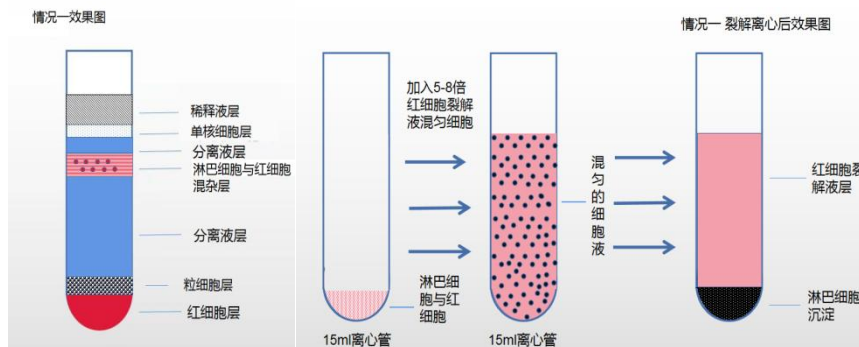

## 情况二：单核细胞层和单个核细胞层混在一起不能分开

1. 吸取全部白色环状细胞层，清洗后用组织样本稀释液 1-2ml 重悬细胞。
2. 使用分离液 2 重新提取淋巴细胞。
3. 取 15ml 离心管，加入 4ml 分离液 2，将用组织样本稀释液重悬的 1-2ml 细胞缓慢加于分离液之液面上，400g，离心 20min。
4. 离心后，离心管可分为 4 层，第一层稀释液层，第二层单核细胞层，第三层分离液层，第四层淋巴细胞层。
5. 可重复检验方法中的目的细胞洗涤方法，获得淋巴细胞。

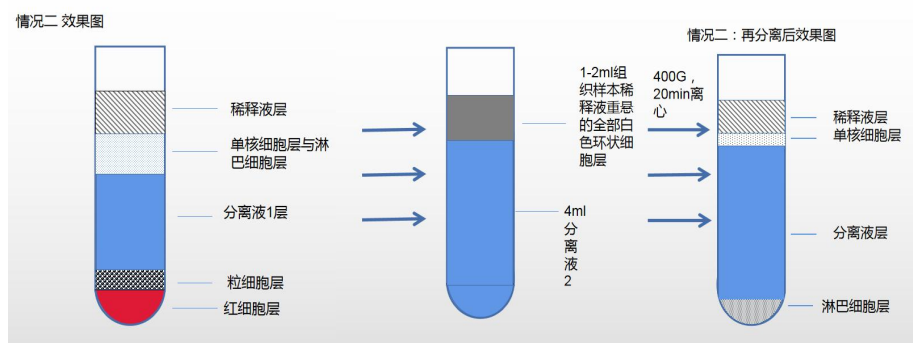

## 【注意事项】

1. 本实验最好不使用高聚合材质（如聚苯乙烯）的塑料制品，应使用无静电、低静电离心管及未经碱处理过的玻璃制品，因为静电作用将导致细胞贴壁、碱处理的玻璃表面会变成毛面，影响细胞分离效果。

2. 如实验后细胞得率或活性过低，请联系天津灏洋技术支持以寻求帮助，具体联系方式详见下方生产企业信息。

**【储存条件及有效期】**

常温保存，有效期2年。本品易感染细菌，需无菌条件操作。无菌条件下操作，启封后置常温保存。如4℃保存，本分离液易出现白色结晶，影响分离效果。

**【参考值（参考范围）】**


本实验淋巴细胞提取率大于80%。

**【可能存在的问题及解决方法】**

1. 由于血液粘度、细胞密度等差异可能造成的问题及解决方案如下表所示：

出现情况	出现原因	建议解决方案
离心后目的细胞存在于血浆层或稀释液层	转速过小或离心时间过短	适当增减转速
离心后目的细胞存在于分离液中	转速过大或离心时间过长	
离心后白环层弥散	细胞密度过大	调整细胞密度
离心后白环层太浅或看不见	细胞密度过小	

2. 离心力公式

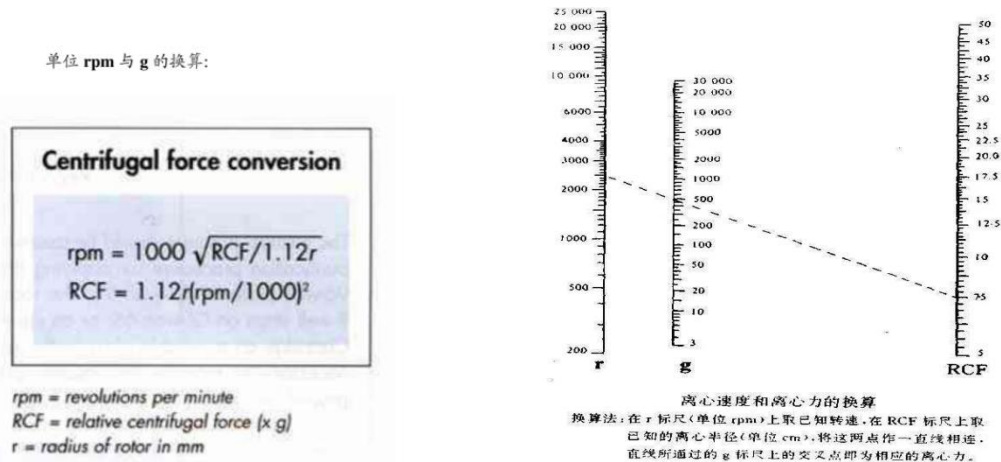

3. 本分离液分离细胞的原理为密度梯度离心，其密度与温度、大气压等密切相关。不同地区客户可根据当地情况对离心条件进行适当调整。建议对离心条件进行调整时，恒定离心时间，对离心转速进行调整。

4. 本分离液依照国际标准，全部使用药用级原料，性能指标与国产同类产品略有不同，可能出现红细胞沉降不完全的情况，可以适当加大离心转速。

注：在对离心条件进行调整时，离心转速的加减以 50-100g 为基数，直至达到最佳分离效果，离心力最小不得小于 400g，最大不得大于 1200g。离心时间以 20-30min 为准。